

NATUR[®]

คู่มือการใช้งาน

เนเจอร์ ชุดปั๊มนมเก็บแบบโยก
Instructions for use



ด้ามจับกดนัดมือ ใช้งานง่าย
ปั๊มนมสะดวกได้ด้วยมือเดียว



แผ่นนวดซิลิโคน นุ่มกระชับ
ช่วยกระตุ้นน้ำนม...เสมือนลูกดูดจากอกแม่




ปั๊มเกลี้ยงเต้า อย่างนุ่มนวล
ควบคุมแรงบีบได้ด้วยตัวเอง

เนเจอร์ ดูแลลูกรักให้เติบโตอย่างมีคุณค่า

⚠ ก่อนการใช้งานชุดปั๊มนมเก็บแบบโยก กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด และเก็บไว้อ้างอิงในอนาคต

Please read this instructions carefully before use and retain it for future reference

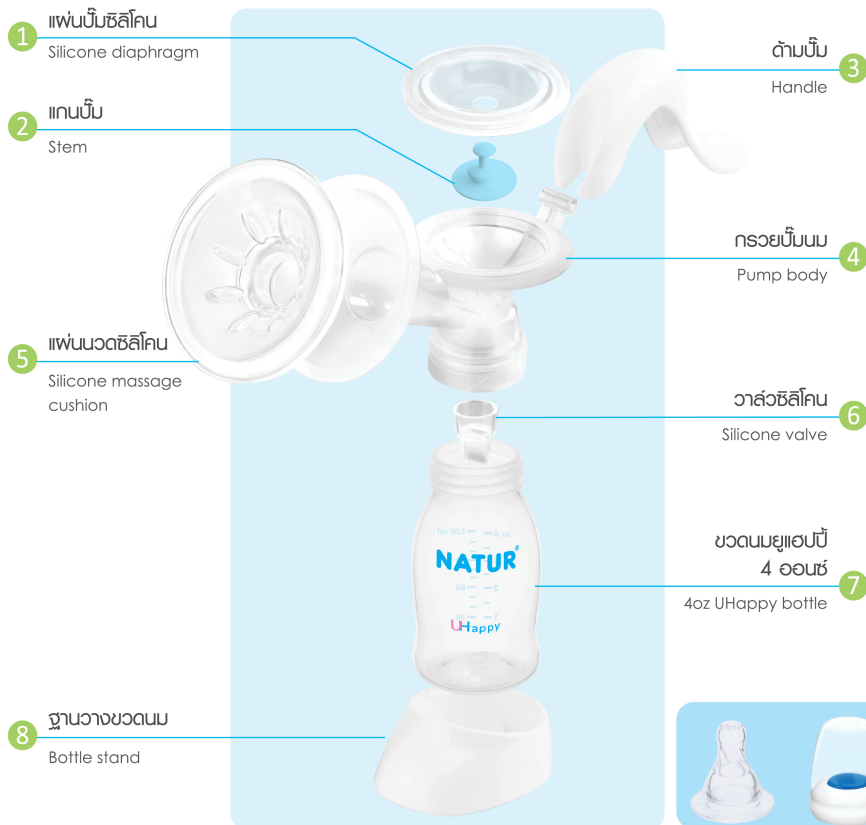

รวมไบโอมีมิก S ฟาครอบ | ฟาคลิวด
แผ่นปิด

ในชุดประกอบด้วย | What's included

รายการ Description	วัตถุดิบ Raw material	ล้าง/ฆ่า Wash/Sterilize	จำนวน (ชิ้น) Quantity (piece)
แผ่นบีนซิลิโคน Silicone diaphragm	ซิลิโคน Silicone	✓	2
แกนบีน Stem	โพลีโพรพิลีน PP	✓	1
ด้ามบีบ Handle	โพลีโพรพิลีน PP	✓	1
กรวยปั๊มนม Pump body	โพลีโพรพิลีน PP	✓	1
แผ่นนวดซิลิโคน Silicone massage cushion	ซิลิโคน Silicone	✓	1
วาล์วซิลิโคน Silicone valve	ซิลิโคน Silicone	✓	3
ขวดนมยูเอชบี 4 ออนซ์ 4oz UHappy bottle	โพลีโพรพิลีน PP	✓	1
ฐานวางขวดนม Bottle stand	โพลีโพรพิลีน PP	✓	1
จุกนมไบโอมีมิก ไซส์ S biomimic nipple size S	ซิลิโคน Silicone	✓	1
ฟาครอบ Hood	โพลีโพรพิลีน PP	✓	1
ฟาคลิวด Cap	โพลีโพรพิลีน PP	✓	1
แผ่นปิด Sealing disc	โพลีโพรพิลีน PP	✓	1

แอฟริ่ บู๊ตึบึนบเกึบแบบโยก

ได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้งานง่าย ด้านบนจับถนัดมือ สะดวกในการบีบนม บีบเปลี่ยนเต้าอย่างนุ่มนวล และสามารถควบคุมจังหวะการบีบนมได้ด้วยตนเอง อย่างมีประสิทธิภาพ แรงบีบสูงสุด 370 mmHg

แผ่นปั๊มซิลิโคน มีความยืดหยุ่นสูง ช่วยให้เกิดแรงดูด สดุดนากาในขณะบีบนม เพื่อบำบัดน้ำหลัได้อย่างต่อเนื่อง

แผ่นนวดซิลิโคน ออกแบบให้รูปทรงแบนกับเต้านม และมีปุ่มนูน ช่วยนวดกระตุ้นบริเวณลานนมเพื่อเปลี่ยนแบบ จังหวะการดูดนมของการด้อย่างเป็นธรรมชาติ ขนาดกรวย 25 มม. (กรณีประกอบแผ่นนวดซิลิโคน ขนาดกรวย 20 มม.)

ข้อแนะน้าในการใช้

- ก่อนการใชงานครั้งแรก ควรล้างทำความสะอาดผลิตภัณฑ์
- หลังการใชงานทุกครั้ง ควรล้างทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ล้างขวดนม แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด จากนั้นน้าไปฆ่าเชื้อ โดยใชเครื่องึ่งขวดนมไฟฟ้า และปฏิบัติตามคู่มือการใชงาน
- ไม่ควรใช้แผ่นปั๊มยัดเยียดหยามทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ เพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนได้

⚠ ข้อควรระวัง


- ควรล้างทำความสะอาดวาล์วซิลิโคน โดยการถูเบาๆ และล้างออกด้วยน้ำสะอาด
- ไม่ควรใช้แปรงล้างจากนมทำความสะอาดวาล์วซิลิโคน เพราะอาจทำให้วาล์วเสียหายได้
- ควรระมัดระวังในการทำความสะอาดแผ่นปั๊มซิลิโคน และวาล์วซิลิโคน หากชิ้นส่วนชำรุด จะทำให้ดูดนมไม่สาารถทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ชิ้นส่วนทุกชิ้นต้องแห้งสนิท ก่อนน้าไปประกอบ




วิธีการถอดอุปกรณ์




หมุนขวดนม 7 ออกจากกรวยนึบ 4 โดยการหมุนคลายเกลียวออก

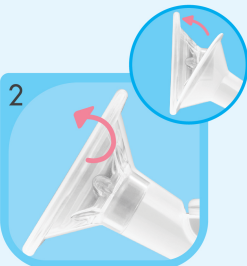


ถอดแผ่นนวดซิลิโคน 5 ออกจากปากกรวยนึบ

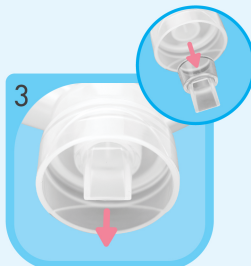


ดึงวาล์วซิลิโคน 6 ออกจากด้านในของกรวยนึบ 4

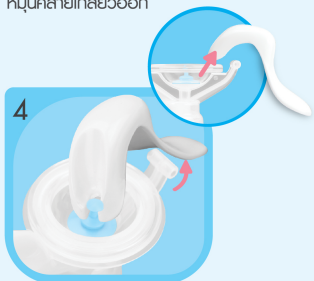

ถอดด้านนึบ 3 โดยการจับกรวยนึบ 4 และยกด้านนึบจึดขึ้นจนได้ยินเสียง “คลิก” จากนั้นดึงด้านนึบออกจากแกนนึบ 2

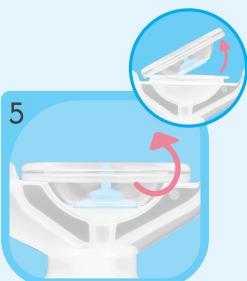


ดึงแผ่นนึบซิลิโคน 1 ออกจากกรวยนึบ 4

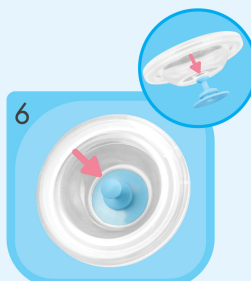


กดแกนนึบ 2 ให้ออกจากช่องแผ่นนึบซิลิโคน 1 และดึงออก

วิธีการประกอบ


⚠ ก่อนการประกอบอุปกรณ์ทุกครั้ง ควรล้างมือให้สะอาด และตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ทุกชิ้นสะอาดและแห้งสนิท

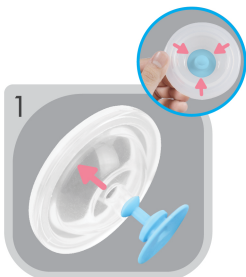


ประกอบแท่นปั๊ม ② เข้ากับช่อง
แท่นปั๊มซิลิโคน ① กดให้
ลงล็อกตามขอบรอบแท่นปั๊ม

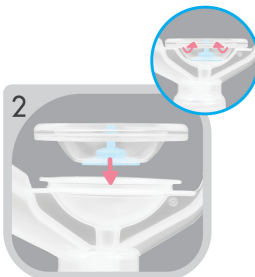

ประกอบแท่นปั๊มซิลิโคน ① เข้ากับ
กรวยปั๊ม ④ แลกดขอบซิลิโคน
ตามขอบรอบกรวยปั๊มให้ลงล็อก

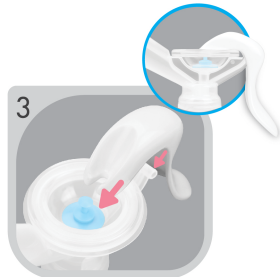


ประกอบด้านปั๊ม ③ เข้ากับแท่นปั๊ม ②
โดยนำส่วนที่เป็นร่องของด้านปั๊ม
สอดเข้ากับแท่นปั๊ม จากนั้นกดด้านปั๊ม
เข้ากับกรวยปั๊ม ④ จนได้ยินเสียง “คลิก”

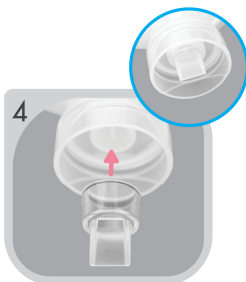

ใส่วาล์วซิลิโคน ⑥ เข้ากับ
ด้านในของกรวยปั๊ม ④
แล้วกดให้แน่นสนิท



ประกอบขวดนม ⑦ เข้ากับ
เกลียวของกรวยปั๊ม ④
โดยหมุนเกลียวให้แน่น

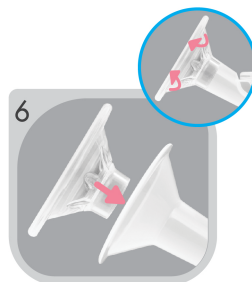

ประกอบแผ่นนวดซิลิโคน ⑤
เข้ากับปากกรวยปั๊ม แลกดขอบ
ซิลิโคนตามขอบรอบปากกรวยปั๊ม
ให้ลงล็อก



ตั้งชุดปั๊มนมไว้ที่ฐานวางขวดนม ⑧
เพื่อเตรียมการปั๊มนมต่อไป

คำแนะนำการใช้กรวยปั๊มนม

กรวยปั๊มนมออกแบบให้กระชับรับเต้านมคุณแม่และสลับพัสนุ่มนวล
โดยใช้งานได้ทั้ง 2 แบบตามความเหมาะสมของคุณแม่




แบบที่ 1: ใส่แผ่นนวดซิลิโคน
ขนาดรูกรวย: 20 มม.



แบบที่ 2: ใส่แผ่นนวดซิลิโคน
ขนาดรูกรวย: 25 มม.

ข้อแนะนำในการบินบนบ้านแม่

- ล้างมือให้สะอาดและใช้ผ้าเช็ดหน้าอุ่นทำความสะอาดบริเวณลานนมก่อนการบินบน
- ตรวจสอบความสะอาดและความแห้งสนิทของชุดบินบน
- ตรวจสอบการประกอบชุดบินบนให้ถูกต้องตามคู่มือ
- นำนํ้ากรวยบินประกบกับเต้านม โดยให้หัวนมอยู่ตรงกลางของรูกรวยบิน
- ประกบเต้านมกับกรวยบินให้แนบสนิทเพื่อให้เกิดสุญญากาศ
- รออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเข้าบินกรวยบิน เพราะอาจทำให้ไม่มีแรงในการบินบน
- บินตามบ้านแม่ เป็นจังหวะอย่างผ่อนคลาย ปล่อยให้บ้านแม่ไหลออกตามธรรมชาติ ไม่ควรเร่งบินบนเร็วเกินไป เพราะอาจทำให้เต้านมเจ็บหรืออักเสบได้

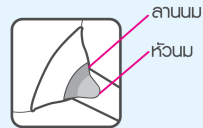

ข้อแนะนำในการจัดเก็บและทำลายบ้านแม่

- ควรจัดเก็บบ้านแม่ในขวดเก็บบ้านแม่หรือถุงเก็บบ้านแม่ในปริมาณที่เพียงพอสำหรับลูกในแต่ละมื้อ หากลูกทานไม่หมดจะต้องทิ้งทันที ไม่ควรเก็บไว้ทานในมื้อถัดไป
- การทำลายบ้านแม่แช่แข็ง ควรนำออกจากช่องแช่แข็งมาวางในตู้เย็นช่องธรรมดา 1 คืน
- ไม่ควรนำบ้านแม่แช่แข็งไปทำลายในเตาไมโครเวฟ, เครื่องนึ่งขวดนม หรือใช้น้ำร้อนจัด เพราะอาจทำให้เสียคุณประโยชน์ทางโภชนาการของบ้านแม่ได้
- ไม่ควรนำบ้านแม่ที่ได้ทำลายไปแล้ว กลับมาแช่ซ้ำในตู้เย็น

ระยะการเก็บรักษาบ้านแม่

สถานที่เก็บ	อุณหภูมิ	ระยะเวลาที่เก็บได้
อุณหภูมิห้อง	สูงกว่า 25°C	1 ชั่วโมง
อุณหภูมิห้อง	ต่ำกว่า 25°C	4 ชั่วโมง
กระป๋องเก็บความเย็น	15°C	1 วัน
ตู้เย็นธรรมดาชั้นบนสุด	4°C	2-3 วัน
ตู้เย็นช่องแช่แข็ง (แบบประตูเดียว)	-15°C	2 สัปดาห์
ตู้เย็นช่องแช่แข็ง (แบบประตูแยก)	-18°C	3 เดือน

คำเตือน

- ชุดบินบนนี้เป็นอุปกรณ์ส่วนบุคคล ไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่น
- ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ควรตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ทุกครั้ง หากพบว่าชำรุด ควรเปลี่ยนใหม่ทันที
- ชิ้นส่วนทุกชิ้นต้องแห้งสนิทก่อนนำไปประกอบ เพื่อประสิทธิภาพของการบินบน และป้องกันความเสียหาย
- ควรเก็บชุดอุปกรณ์ให้พ้นจากมือเด็ก

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
แรงบีบต่ำลงหรือไม่ดูด	ตรวจสอบชิ้นส่วนและจุดเชื่อมต่อต่างๆ • ประกอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ครบและแน่นสนิท • วาล์วซิลิโคน, แผ่นบีบซิลิโคน หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ต้องไม่ฉีกขาด, วาล์วต้องไม่เปิดอ้ากว้าง หากพบว่าชำรุด ควรเปลี่ยนใหม่ทันที • ถ้าปากกรวยบินแนบไม่สนิทกับเต้านม จะทำให้อากาศแทรก แรงบีบจะต่ำลง ควรปรับองศาการวางปากกรวยให้ใหม่ให้แนบสนิทกับเต้านม
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ชำรุด	ติดต่อสั่งซื้อใหม่ได้ที่ www.naturbf.com



จัดจำหน่ายภายใต้การควบคุมของ
บริษัท นاتور คอร์ปอเรชั่น จำกัด
28 ซอยเอกชัย 68 ถนนเอกชัย
แขวงคลองบางพระม เขตบางบอน
กรุงเทพฯ 10150



สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

0 2415 0046, 08 6378 7501

marketing@natur.co.th

Natur Corporation

@NaturCorporation

